

Bilimplant / Exocad Kütüphane Kullanım Rehberi

Bilimplant Exocad V7.0.1

02/08/2023



Dudullu OSB Mahallesi İmes 305 Sokak C Blok No:3 Ümraniye / İSTANBUL / TURKEY

Web: www.bilimplant.com **E-mail:** info@bilimplant.com **Phone :** +(90) 216 999 50 41

Dijital Kütüphane Kullanım Rehberi (EXOCAD)

Kemik Seviyesi - Bone Level


Ti-Base

1 İmplant Kütüphanesi Seçimi Yapılır.

Bilimplant Tissue Level;
Doku Seviyesi İmplant
Kütüphanesi

Bilimplant Bone Level;
Kemik Seviyesi İmplant
Kütüphanesi

Bilimplant Bone Level SP;
2.9 Platform İmplant Kütüphanesi

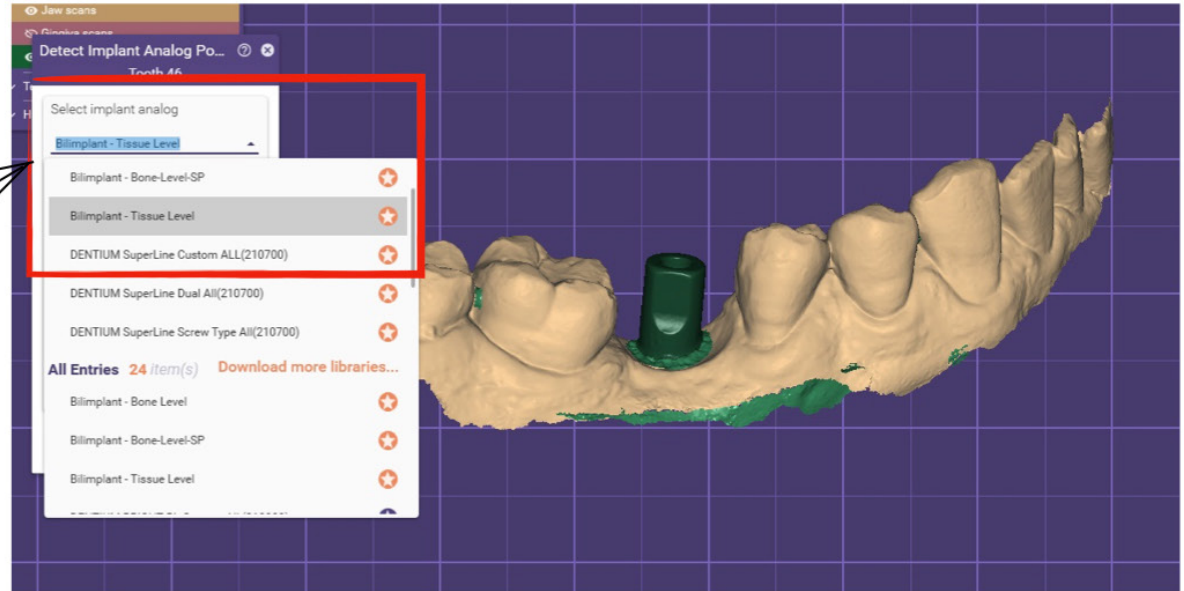

Dijital Kütüphane Kullanım Rehberi (EXOCAD)


Kemik Seviyesi - Bone Level

Ti-Base

2 İmplant Dayanak Türü Kütüphanesi Seçimi Yapılır.

Nolock RP-NP
Köprü Tipi Regular (Geniş-1.8)
Narrow (Dar - 1.6) Platform Seçimi

Lock RP-NP
Kron Tipi Regular (Geniş-1.8)
Narrow (Dar-1.6) Platform Seçimi

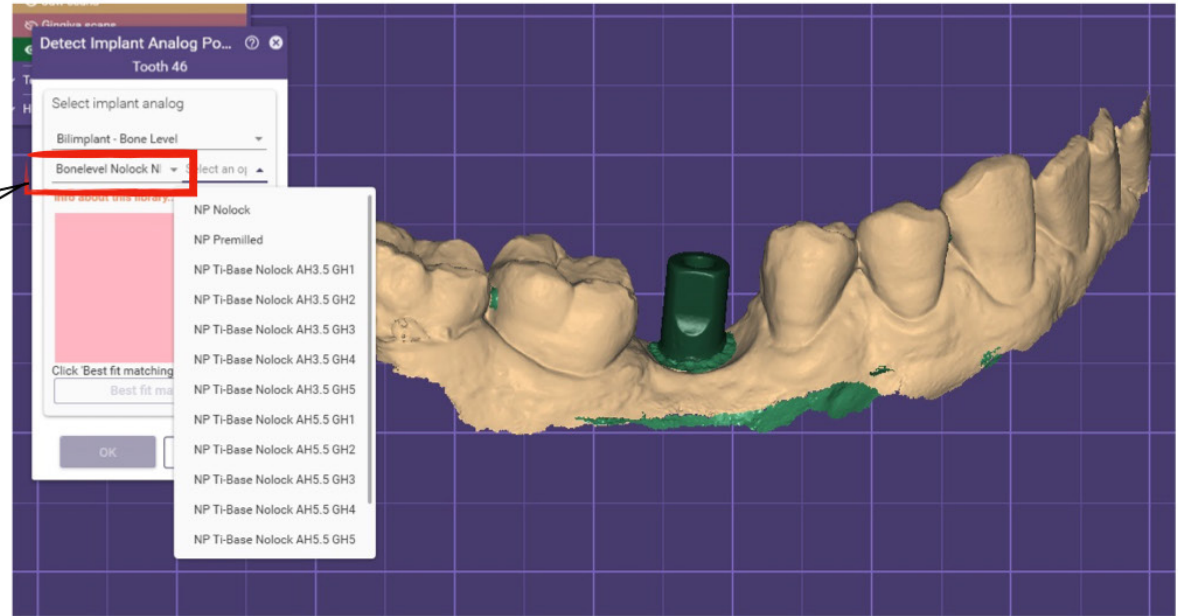

Dijital Kütüphane Kullanım Rehberi (EXOCAD)

Kemik Seviyesi - Bone Level

Ti-Base

3

Ti-Base kütüphanesinden
İhtiyaca göre seçim yapılır.

NP Nolock; İmplant
Platformuna oturan üretim için
seçilir.


NP Premilled; Premill (Custom-
Bireysel) dayanak üretimi için
seçilir.

AH (Abutment Height); Baca
Boyu Yüksekliği - 3.5-5.5 mm
GH (Gingival Height); Diş Eti
Yüksekliği - 1-5 mm

RP Nolock; İmplant
Platformuna oturan üretim için
seçilir.

RP Premilled; Premill (Custom-
Bireysel) dayanak üretimi için
seçilir.

AH (Abutment Height); Baca
Boyu Yüksekliği - 3.5-5.5 mm
GH (Gingival Height); Diş Eti
Yüksekliği - 1-5 mm

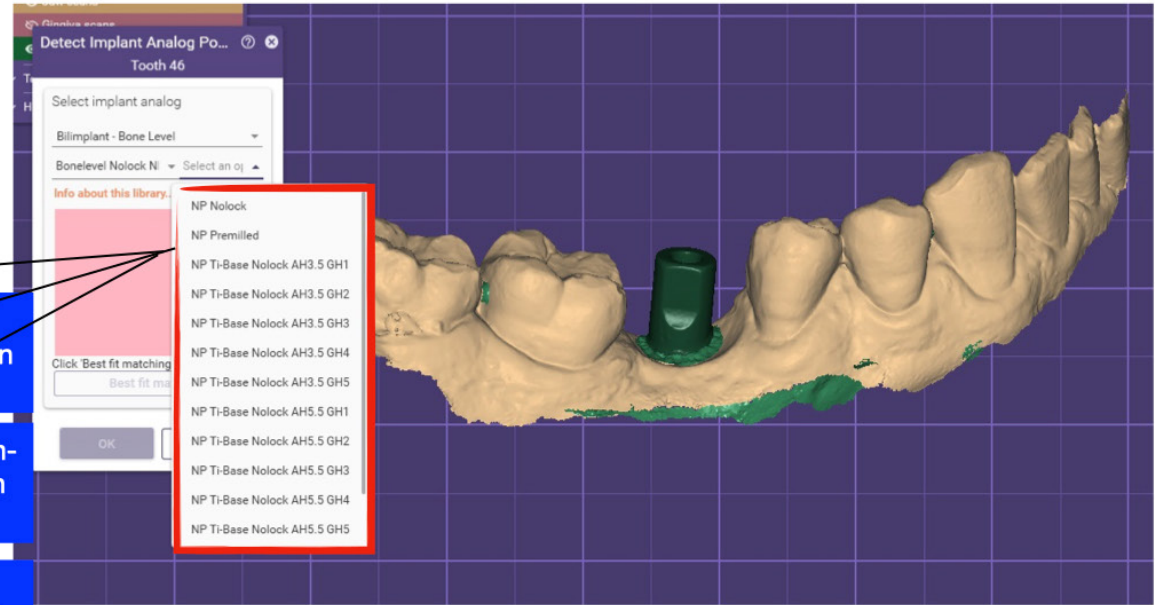

Dijital Kütüphane Kullanım Rehberi (EXOCAD)

Kemik Seviyesi - Bone Level

Multiunit

İmplant gövde tipi seçimi sonrasında, Multinit Seçeneği ve alt seçenekler seçilir.


1

Bilimplant Tissue Level;
Doku seviyesi İmplant
Kütüphanesi

Bilimplant Bone Level;
Kemik seviyesi İmplant
Kütüphanesi

Multiunit kütüphanesinden
ihtiyaca göre seçim yapılır.

2

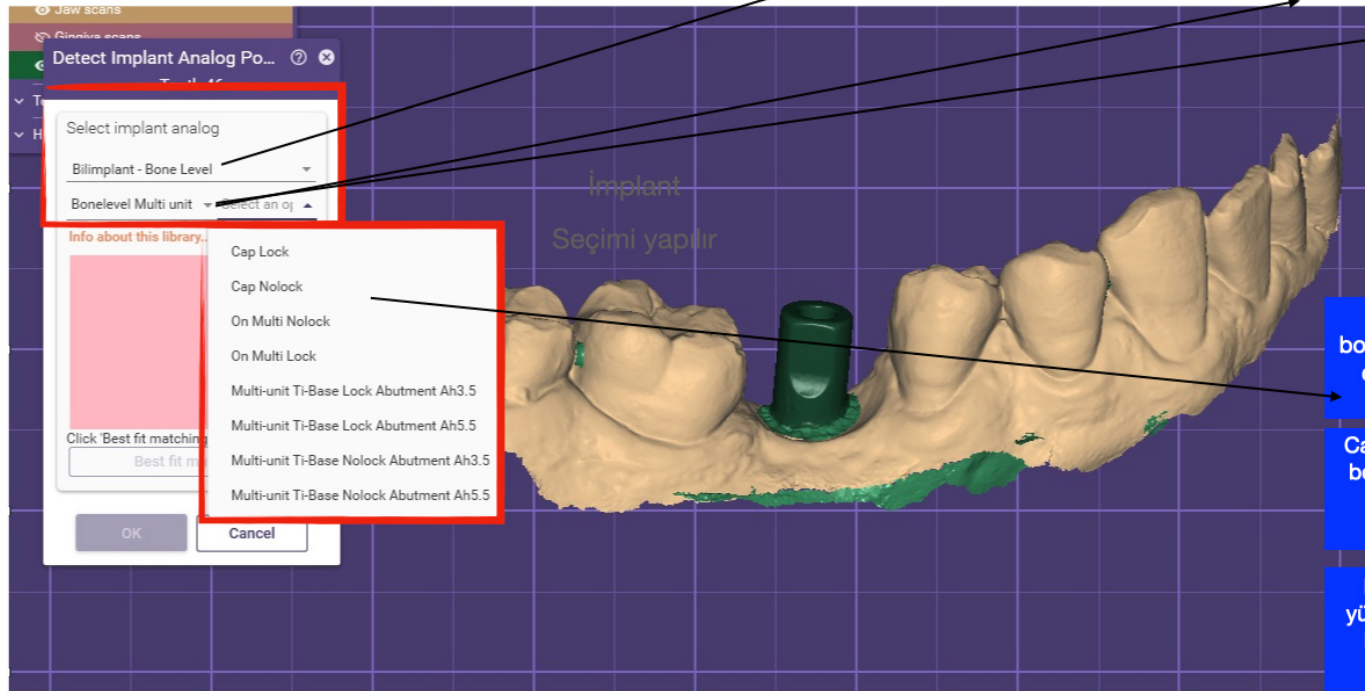

Cap lock; Heks içeren, tek baca boyunda ve baca üzerinde rotasyonel çentiği olmayan Multiunit Ti-base (Kron Tipi)

On Multi Nolock; Direkt Multiunit dayanak üzerine üretim (Lazer Sinter, Milling vb.) yapılmasını sağlar. (Köprü Tipi)

Cap Nolock; Heks içermeyen tek baca boyunda ve baca üzerinde rotasyonel çentiği olmayan Multiunit Ti-base (Köprü Tipi)

On Multi Lock; Direkt Multiunit dayanak üzerine üretim (Lazer Sinter, Milling vb.) yapılmasını sağlar. (Kron Tipi)

Multiunit Ti-Base Lock; Baca boyu yükseklik seçenekleri (3.5-5.5 mm) ve bacada rotasyonel çentiği bulunan bulunan Multiunit Ti-base (Kron Tipi)

Multiunit Ti-Base NoLock; Baca boyu yükseklik seçenekleri (3.5-5.5 mm) ve bacada rotasyonel çentiği bulunan bulunan Multiunit Ti-base (Köprü Tipi)

Dijital Kütüphane Kullanım Rehberi (EXOCAD)

Kemik Seviyesi - Tissue Level


Ti-Base

1 İmplant kütüphane seçimi yapılır.

Bilimplant Tissue Level
Doku seviyesi İmplant Kütüphanesi

Bilimplant Bone Level
Kemik seviyesi İmplant
Kütüphanesi

Bilimplant Bone Level SP
2.9 platform implant Kütüphanesi

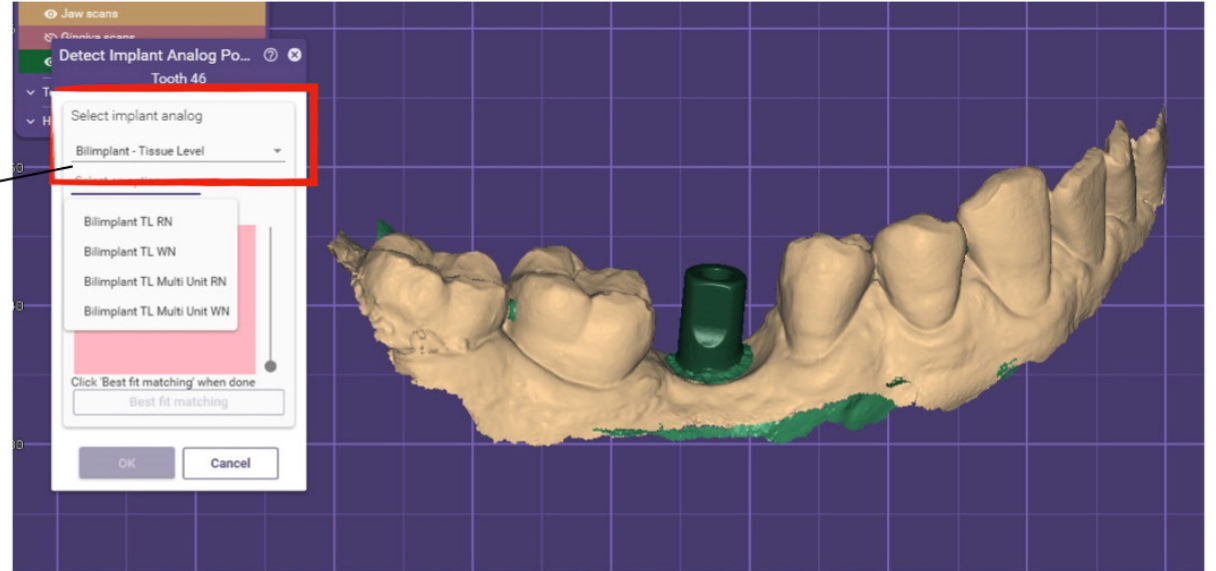


Dijital Kütüphane Kullanım Rehberi (EXOCAD)

Kemik Seviyesi - Tissue Level

Ti-Base

2 İmplant dayanak türü kütüphanesi seçimi yapılır.

BİLİMLANT TL RN ; Doku Seviyesi Regular (Dar - 4.1) Platform Dayanak Kütüphanesi	BİLİMLANT TL WN ; Doku Seviyesi Wide (Geniş - 4.8) Platform Dayanak Kütüphanesi
BİLİMLANT MULTIUNIT RN ; Multiunit Regular (Dar - 4.1) Platform Dayanak Kütüphanesi	BİLİMLANT MULTIUNIT WN ; Multiunit Wide (Geniş - 4.8) Platform Dayanak Kütüphanesi

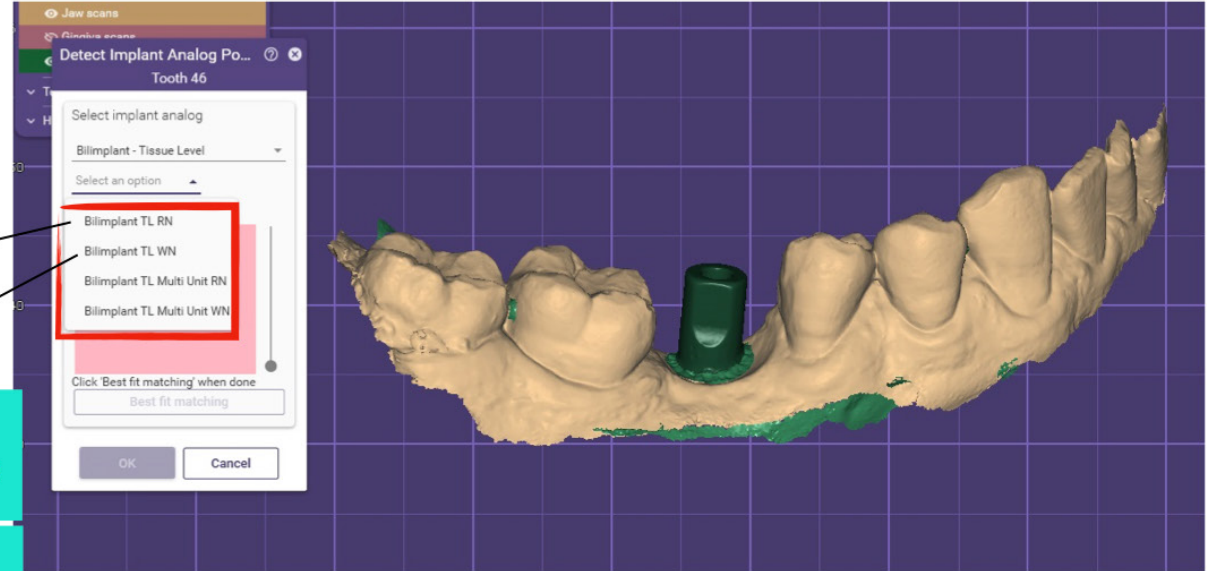

Dijital Kütüphane Kullanım Rehberi (EXOCAD)

Kemik Seviyesi - Tissue Level

Ti-Base

3 Ti-Base kütüphanesinden
İhtiyaca göre seçim yapılır.

WN (WideNeck) Lock; Geniş
4.8 İmplant Platformuna oturan
Üretim İçin Seçilir
(Kron Tipi)


WN (WideNeck) NoLock; 4.8
İmplant Platformuna oturan
Üretim İçin Seçilir
(Köprü Tipi)

WN (WideNeck) Premill; 4.8
Premill (Custom-Bireysel)
Dayanak Üretimi İçin Seçilir.

RP NoLock; İmplant
Platformuna oturan Üretim İçin
Seçilir.

RP Premill; Premill (Custom-
Bireysel) Dayanak Üretimi İçin
Seçilir.

AH ; (Abutment Height) Baca
Boyü Yüksekliği - 3.5-5.5 mm
GH ; (Gingival Height) Diş Eti
Yüksekliği - 1-5 mm

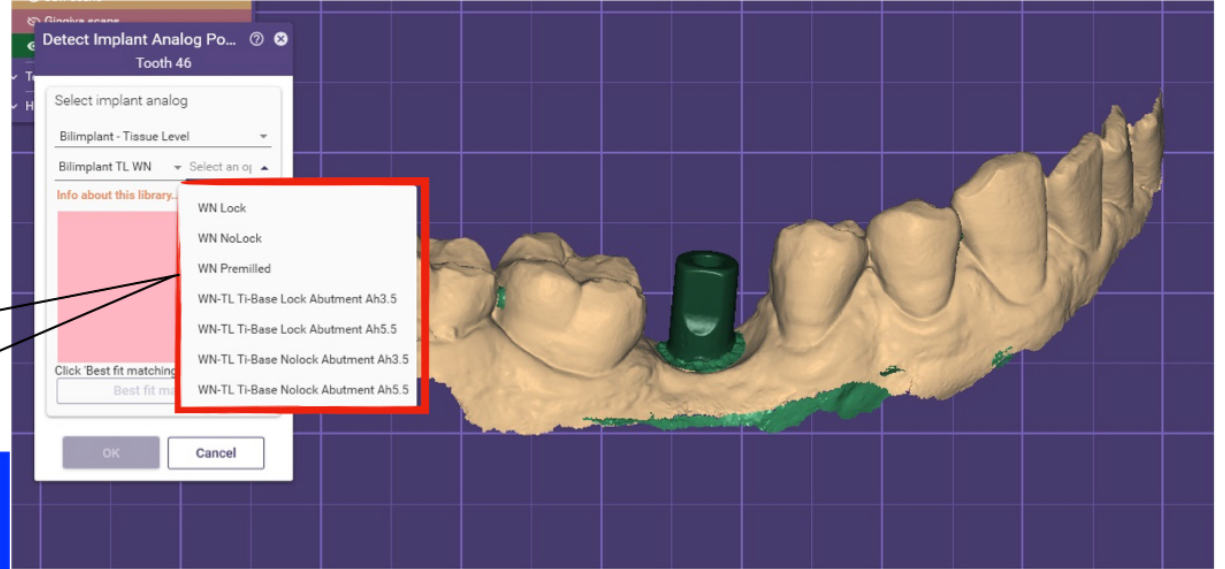


Dijital Kütüphane Kullanım Rehberi (EXOCAD)

Kemik Seviyesi - Tissue Level

İmplant gövde tipi seçimi sonrasında, Multunit Seçeneği ve alt seçenekler seçilir.

1

Multunit

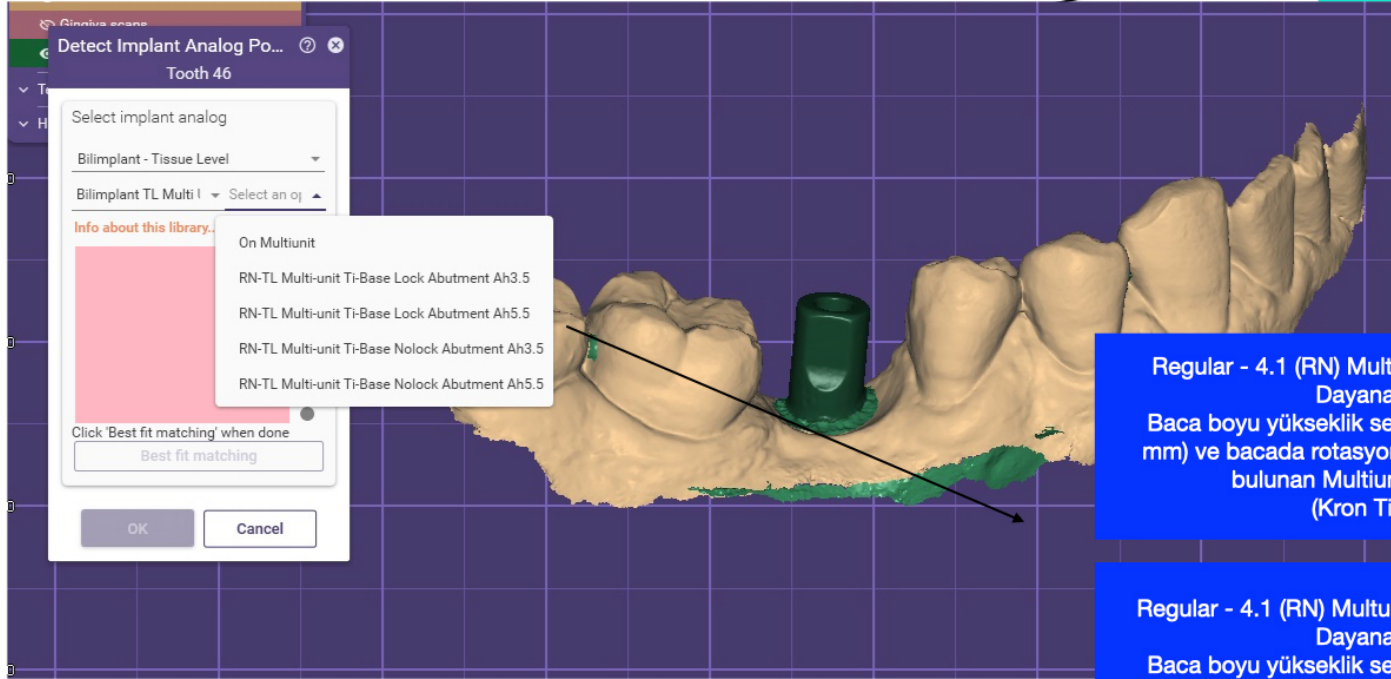

Bilimplant Tissue Level
Doku seviyesi İmplant
Kütüphanesi

Bilimplant Bone Level
Doku seviyesi İmplant
Kütüphanesi

Multunit kütüphanesinden
ihtiyaca göre seçim yapılır.

2

On Multi; Direk Multunit Dayanak
üzerine üretim (Lazer Sinter, Milling
vb.) yapılmasını sağlar.

Regular - 4.1 (RN) Multunit Ti-Base Lock
Dayanak;
Baca boyu yükseklik seçenekleri (3.5-5.5
mm) ve bacada rotasyonel çentiği bulunan
bulunan Multunit Ti-base
(Kron Tipi)

Wide - 4.8 (WN) Multunit Ti-Base Lock
Dayanak;
Baca boyu yükseklik seçenekleri (3.5-5.5
mm) ve bacada rotasyonel çentiği bulunan
bulunan Multunit Ti-base
(Kron Tipi)

Regular - 4.1 (RN) Multunit Ti-Base NoLock
Dayanak;
Baca boyu yükseklik seçenekleri (3.5-5.5
mm) ve bacada rotasyonel çentiği bulunan
bulunan Multunit Ti-base
(Köprü Tipi)

Wide - 4.8 (WN) Multunit Ti-Base NoLock
Dayanak;
Baca boyu yükseklik seçenekleri (3.5-5.5
mm) ve bacada rotasyonel çentiği bulunan
bulunan Multunit Ti-base
(Köprü Tipi)